



21HQ613D

21.3" 5MP IPS

MONITOR DE DIAGNÓSTICO PARA MAMOGRAFÍAS



MONITOR DISEÑADO PARA MAMOGRAFÍA

El monitor de diagnóstico LG de 21,3 pulgadas y 5MP IPS, modelo 21HQ613D-B, es una pantalla especializada diseñada para mamografía y otras necesidades de imágenes médicas.

Cuenta con una pantalla IPS de alta resolución de 2048x2560, garantizando una reproducción de imágenes detallada y precisa, esencial para diagnósticos críticos como la mamografía digital de campo completo y la tomosíntesis digital de mama.

Sus funcionalidades mejoradas, como el modo Vista Focalizada y el modo de patología, mejoran la experiencia visual al permitir a los usuarios concentrarse en las regiones de interés y proporcionar una claridad similar a la de un microscopio, respectivamente.



5 AÑOS DE GARANTÍA



LG EN CHILE



TARJETA DE VIDEO

CLIENTES QUE CAMBIARON A MONITORES MÉDICOS LG



DISPONIBILIDAD DE STOCK EN AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA Y CHILE

21HQ613D

21.3" 5MP IPS


MONITOR DE DIAGNÓSTICO
PARA MAMOGRAFÍAS

Monitor de Diagnóstico 21.3" 5MP IPS
**DISEÑADO PARA IMÁGENES
MAMARIAS.**




IMÁGENES DE ALTA DEFINICIÓN

El monitor de diagnóstico 21HQ613D muestra imágenes radiológicas, incluidas mamografías digitales de campo completo y tomosíntesis digital de mama, con un brillo de 1,100 cd/m² y una relación de contraste de 1,800:1.

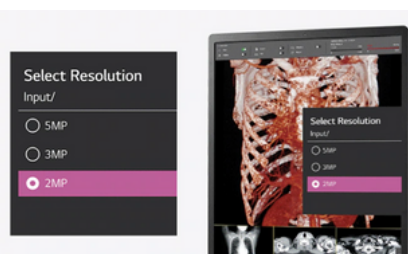

AJUSTA EL MODO DE RESOLUCIÓN SEGÚN TUS NECESIDADES

Los diversos modos de resolución (5/3/2MP) del 21HQ613D permiten a los usuarios personalizar su resolución para adaptarse mejor a sus respectivas necesidades.

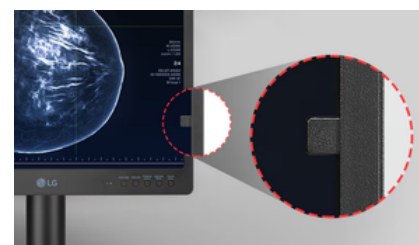


CONSISTENCIA EN IMÁGENES MÉDICAS

El sensor frontal, respaldado por un software de calibración, permite la calibración sin necesidad de equipo de medición adicional, garantizando una calidad de imagen estable.

Conexión en Cadena

CONEXIÓN SIMPLE PARA UN ESPACIO DE TRABAJO ORDENADO

Haz que tu espacio de trabajo sea más productivo con la configuración de conexión en cadena. Puedes reducir el desorden en tu escritorio y simplificar la gestión de cables, lo que contribuye a un espacio de trabajo más eficiente.

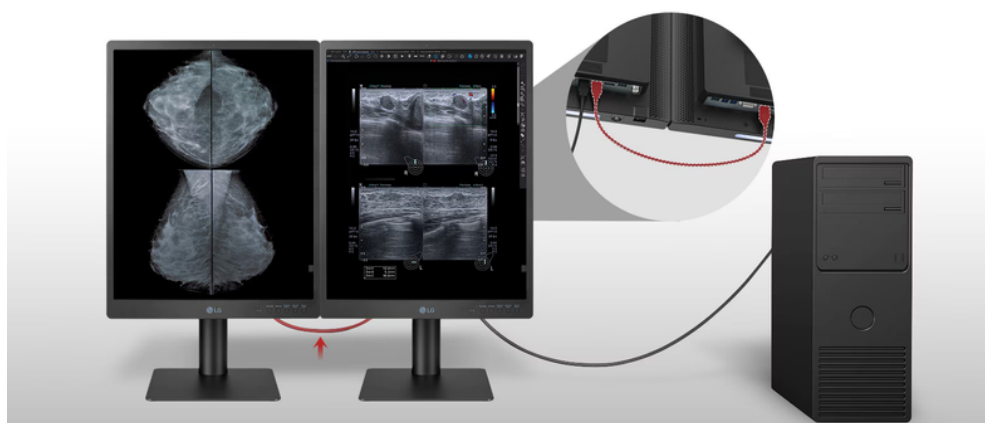



21HQ613D

21.3" 5MP IPS

MONITOR DE DIAGNÓSTICO PARA MAMOGRAFÍAS



MONITOR

Tamaño [pulgadas]	21.3
Tratamiento de superficie	Antirreflejante
Resolución	2048 x 2560
Ángulo de Visión (CR≥10)	178°(I/D), 178°(ARR/ABA)
Relación de Contraste (Típico)	1800:1
Bit de Color	10bit
Relación de Aspecto	4:5
Tiempo de Respuesta	5ms (GtG en Más Rápido)
Paso de Píxeles	0.165 X 0.165 mm
Brillo (Típico) [cd/m²]	1100
Gama de colores (Típico)	NTSC 72% (CIE1931)

CARACTERÍSTICAS

Iluminación	Sí
Sensor de presencia	Sí
Modo patología	Sí
Sensor de luminancia automática	Sí
Flicker Safe	Sí
Modo Lectura	Sí
Sensor Frontal	Sí
Vista Focalizada	Sí
Cumplimiento DICOM	Sí
Ahorro de energía inteligente	Sí
Calibración de hardware	Calibración de Hardware Lista
Super Resolución+	Sí
Temperatura de Color	6500K/7500K/9300K/Manual(5000K-10000K)
Modo Caja de Luz	Sí
Estabilizador de Negros	Sí
Estabilización de Brillo	Sí
Teclas Rápidas	Sí (5 teclas)

ENERGÍA

Consumo de Energía (CC Apagado)	Menor a 0.3W
Entrada de CA	100-240V (50/60Hz)
Tipo	Fuente de Alimentación Externa (Adaptador)
Salida de CC	19V, 6.32A

PUERTOS

DisplayPort	Sí (Entradas 2c/u - Salidas 1c/u)
Puerto USB Downstream	Sí(2c/u-ver3.0)
Puerto USB Upstream	Sí(2c/u-ver3.0)
Conexión en cadena	Sí (5MP/48Hz)
DVI	Sí (Entrada 1c/u Dual link)



21HQ613D

21.3-INCH 5MP IPS

MONITOR DE DIAGNÓSTICO PARA MAMOGRAFÍAS



FÍSICO

Dimensiones de Envío (WxHxD)	524 x 577 x 296 mm
Peso de Envío	11.4 kg
Dimensiones con Soporte (WxHxD)	364.5 x 634.4 x 233.6 mm
Peso con Soporte	7.85 kg
Dimensiones sin Soporte (WxHxD)	364.5 x 473.4 x 78 mm
Peso sin Soporte [kg]	5.45 kg
Capacidad en Pallet (20pi/40pi/40pi HC)	216 / 504 / 672

MECÁNICO

Ajustes de Posición de Pantalla	Inclinación / Altura / Giro / Rotación
Diseño sin Bordes	NORMAL
Montaje en Pared [mm]	100 X 100
Soporte de un Clic	SÍ
Boton Mecánico de Encendido	SÍ
Rango de Altura [mm]	100 mm
Inclinación	SÍ(-5°~20°)
Rotación	SÍ(±90°)
Giro	SÍ(±15°)

ACCESORIO

Adaptador	SÍ
Informe de Calibración (Papel)	SÍ
Display Port	SÍ
Cable de Alimentación	SÍ
DVI-D	SÍ
USB A a B	SÍ

APLICACIÓN DE SOFTWARE

Controlador Dual	SÍ
LG Calibration Studio	SÍ

CERTIFICADOS

IEC (IEC 60601-1/IEC 60601-1-2), EN (EN 60601-1/EN 60601-1-2), IEC (IEC 60950-1 & IEC 62368-1 / CISPR 32, 35), EN (EN 62368-1 / EN 55032, 55035), cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1), CE, FDA, ISO13485, RoHS, REACH, WEEE, MFDS

CONTÁCTANOS

+562 2581 4440

sales@trucell.cl

www.trucell.cl