




31HN713D

31" 12MP IPS

MONITOR DE DIAGNÓSTICO PARA MAMOGRAFÍAS

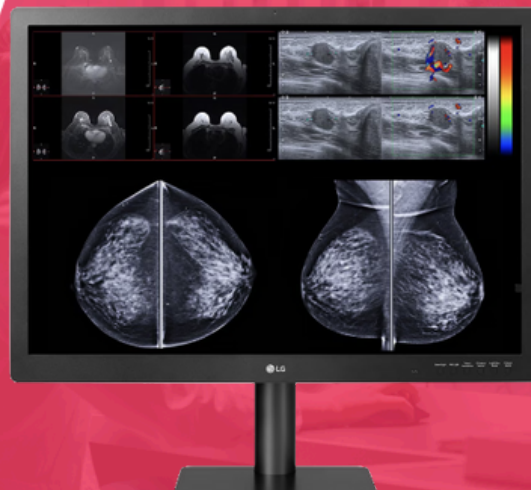

MONITOR DE DIAGNÓSTICO PARA MAMOGRAFÍAS

Los profesionales de la salud requieren monitores de diagnóstico de alta calidad diseñados específicamente para obtener imágenes precisas de mama en mamografía. Estos monitores deben proporcionar un nivel de detalle preciso, una reproducción realista del color y opciones de conectividad versátiles para adaptarse a diversas herramientas de diagnóstico.

El monitor LG 31HN713D-B mejora significativamente la confiabilidad y la eficiencia en el diagnóstico al ofrecer una claridad de alta resolución y funciones enfocadas en el usuario. El diseño y las especificaciones de este monitor responden a las necesidades de los profesionales médicos, ayudando a realizar diagnósticos más precisos, que, últimamente mejoran la atención al paciente.



5 AÑOS DE GARANTÍA



SOPORTE Y PRESENCIA

LG EN CHILE



COMPATIBLE CON
SOPORTE VESA



COMPATIBLE CON CUALQUIER

TARJETA DE VIDEO

CLIENTES QUE CAMBIARON A MONITORES MÉDICOS LG




DISPONIBILIDAD DE STOCK EN AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA Y CHILE

31HN713D

31" 12MP IPS


MONITOR DE DIAGNÓSTICO
PARA MAMOGRAFÍAS

Monitor de 31" 12MP IPS
**DISEÑADO PARA
MAMOGRAFÍAS**

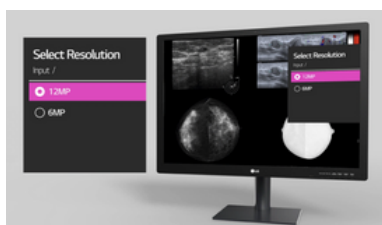

COMPATIBLE CON CUALQUIER DISPOSITIVO

Los monitores de diagnóstico a menudo deben conectarse a diversas modalidades, cada una con resoluciones diferentes. Gracias al modo de multiresolución del 31HN713D, puedes ajustar la resolución del monitor para optimizarla según el dispositivo conectado.

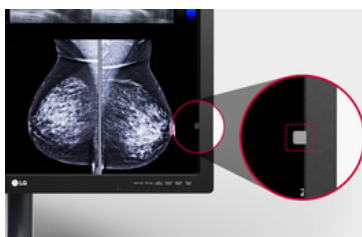

CONSISTENCIA EN IMÁGENES MÉDICAS

El sensor frontal permite una autocalibración automática sin necesidad de equipos de medición adicionales. Mejora la calidad y la consistencia de las imágenes médicas mostradas al mantener valores precisos.




REPRODUCCIÓN DE COLORES REALES

En el modo de patología, el 31HN713D reproduce el mismo nivel de detalle y precisión de color que se observa directamente bajo un microscopio, ayudando a los profesionales de la salud a realizar diagnósticos más precisos.

Iluminación Inferior y de Pared **CONDICIONES ÓPTIMAS DE LECTURA**

Los modos de Iluminación Inferior y de Pared reducen el contraste entre el brillo del monitor y las condiciones de iluminación ambiental, permitiéndote trabajar cómodamente sin necesidad de ajustar la iluminación para ver documentos en papel en el cuarto oscuro.

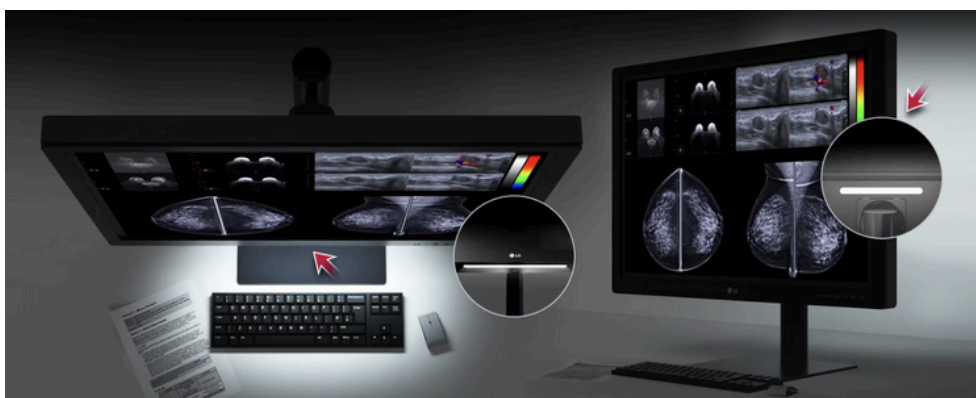



31HN713D

31" 12MP IPS

MONITOR DE DIAGNÓSTICO
PARA MAMOGRAFÍAS



MONITOR

Tamaño [pulgadas]	31
Tratamiento de superficie	Antirreflejante
Resolución	4200 x 2800
Ángulo de Visión (CR≥10)	178°(I/D), 178°(ARR/ABA)
Relación de Contraste (Típico)	1500:1
Bit de Color	10bit
Relación de Aspecto	3:2
Tiempo de Respuesta	5ms (GtG en Más Rápido)
Paso de Píxeles[mm]	0.1554 x 0.1554
Brillo (Típico) [cd/m²]	1200
Gama de colores (Típico)	sRGB 97% (CIE1931)

CARACTERÍSTICAS

Iluminación	SÍ
Sensor de presencia	SÍ
Modo patología	SÍ
Sensor de luminancia automática	SÍ
Flicker Safe	SÍ
Modo Lectura	SÍ
Sensor Frontal	SÍ
Vista Focalizada	SÍ
Cumplimiento DICOM	SÍ
Ahorro de energía inteligente	SÍ
Calibración de hardware	Calibración de Hardware Lista
Super Resolución+	SÍ
Temperatura de Color	6500K/7500K/9300K/Manual(5000K-10000K)
Modo Caja de Luz	SÍ
Estabilizador de Negros	SÍ
Estabilización de Brillo	SÍ
Teclas Rápidas	SÍ(6 teclas)
PBP	2PBP

ENERGÍA

Consumo de Energía (Max.)	180W
Consumo de Energía (CC Apagado)	Menor a 0.3W
Tipo	Fuente de Alimentación Externa (Adaptador)
Entrada de CA	100-240V (50/60Hz)
Salida de CC	24V, 7.5A

PUERTOS

DisplayPort	SÍ (Entradas 2c/u - Salidas 1c/u)
Puerto USB Downstream	SÍ(2c/u-ver3.0)
Puerto USB Upstream	SÍ(2c/u-ver3.0)
Conexión en cadena	SÍ(5MP/48Hz)
DVI	SÍ (Entrada 1c/u Dual link)



31HN713D

31" 12MP IPS

MONITOR DE DIAGNÓSTICO
PARA MAMOGRAFÍAS



FÍSICO

Dimensiones de Envío (WxHxD)	999x337x644 mm
Peso de Envío	21.5kg kg
Dimensiones con Soporte (WxHxD)	704.7x662.6x280 mm
Peso con Soporte	14.0 kg
Dimensiones sin Soporte (WxHxD)	704.7x499.5x83.2 mm
Peso sin Soporte [kg]	10.7 kg

MECÁNICO

Ajustes de Posición de Pantalla	Inclinación / Altura / Rotación
Diseño sin Bordes	NORMAL
Montaje en Pared [mm]	100 X 100
Soporte de un Clic	Sí
Boton Mecánico de Encendido	Sí
Rango de Altura [mm]	110 mm
Inclinación	Sí(-5°~15°)
Rotación	Sí(±15°)

ACCESORIO

Adaptador	Sí
Informe de Calibración (Papel)	Sí
Display Port	Sí
Cable de Alimentación	Sí
Cable USB3.0 Upstream	Sí

APLICACIÓN DE SOFTWARE

Controlador Dual	Sí
------------------	----

CERTIFICADOS

UL (cUL), CE, RoHS, KGMP, IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2), EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2), IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024), EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024), FDA(Class II), ISO13485, GMP, WEEE, MFDS, REACH

CONTÁCTANOS



+562 2581 4440



sales@trucell.cl



www.trucell.cl